

ODSÁVACÍ PŘÍSTROJ

pro sanitní vozy





ÚVOD

Odsávací přístroj je určen pro odsávání z dolních a horních cest dýchacích (ústní dutiny, prostoru nosohltanu a bronchiálního systému). Může se používat k spontánnímu odsávání sekretů, krve a tělesných i nízkoviskózních, vizkózních a pevných složek potravy. Mimoto je tento přístroj vhodný k odsávání vakuových matrací a vakuových dlah.


Je určen pro nemocniční péči, praktické lékaře, záchrannou službu, ošetrovatelské služby, a také pro použití venku a při přepravě. Smí jej používat výhradně osoby, které mají zdravotnické vzdělání a byly poučeny o technice odsávání.

PŘEHLED

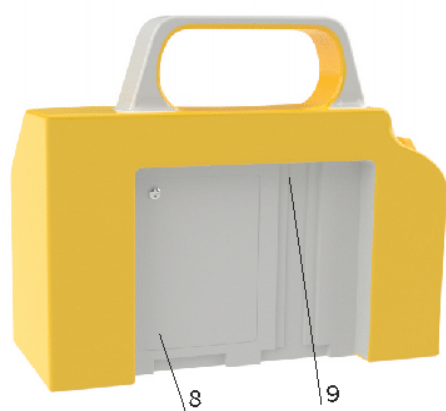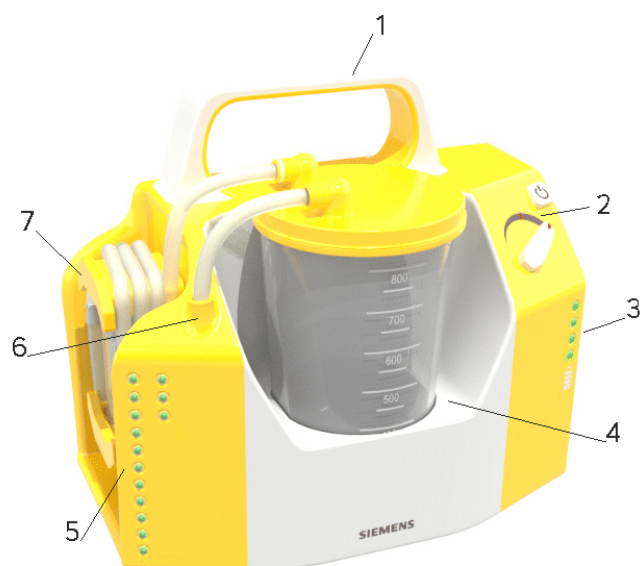


	NÁZEV	ÚČEL
1	RUKOJEŤ	Umožňuje nošení přístroje
2	OVLÁDACÍ PANEL	Umožňuje nastavování a ovládní přístroje
3	UKAZATEL BATERIE	Zajišťuje vizuální kontrolu stavu baterie
4	DRŽÁK PRO SBĚRNOU NÁDOBU	Slouží k uložení sběrné nádoby
5	KONTROLNÍ LED SVĚTLA	Umožňují provádět pravidelnou kontrolu funkce přístroje
6	ÚCHYTKA HADICE	Slouží k zasunutí odsávací hadice
7	DÍL PRO NAVÍJENÍ HADICE PROSTOR PRO LÁHEV S DEZINFEKČÍ	Slouží k uložení odsávací hadice
8	PŘIHRÁTKA PRO BATERII S KRYTEM PŘIHRÁDKY BATERIÍ	Obsahuje baterii Obsahuje rozhraní pro servisní účely
9	NABÍJECÍ ROZHRANÍ (ZAKRYTÉ)	Umožňuje nabíjení přístroje

OVLÁDACÍ PANEL

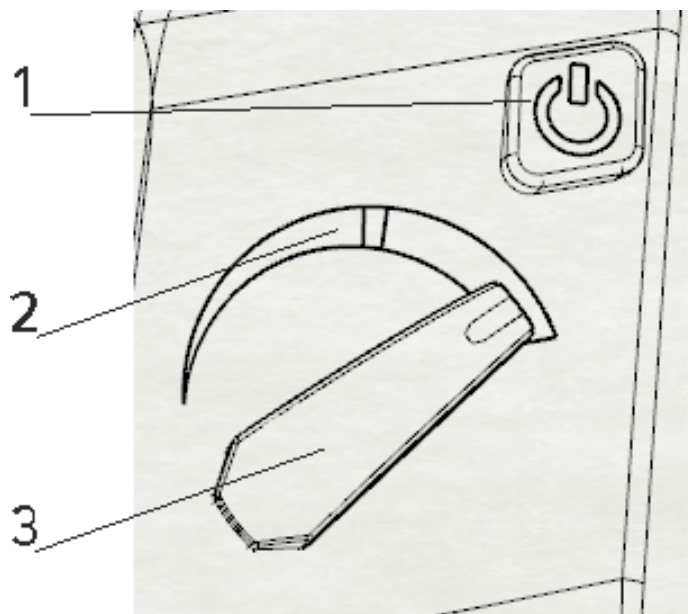


	NÁZEV	ÚČEL
1	TLAČÍTKO ZAP./VYP.	Zapíná, nebo vypíná přístroj. Při přidržení déle, než 3 vteřiny zahajuje testovací sekvenci
2	ROZHRANÍ 200	Znázorňuje hranici 200 pro pediatrické pacienty
3	REGULÁTOR VAKUA	Umožňuje zvolit potřebné vakuum

NAPÁJENÍ

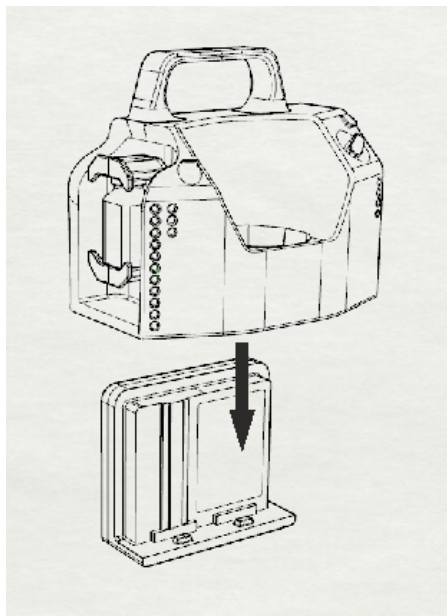

Přístroj je poháněn akumulátorem nebo prostřednictvím externího zdroje stejnosměrného napětí 12 V.



Při uložení do držáku v sanitním voze se přístroj automaticky nabíjí (rozsvícení zelených kontrolky baterie).

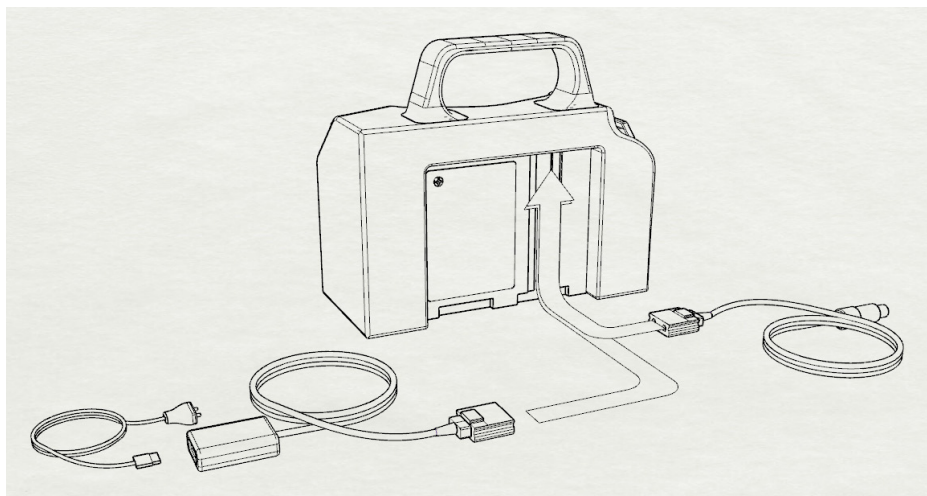


KONTROLA PŘÍSTROJE

1. Je-li zapotřebí: Připojte k odsávací hadici prstovou koncovku.
2. Otvor vedlejšího vzduchu na prsové koncovce uzavřete krytkou.
3. Přidržte tlačítko start 3-5 vteřin, rozsvítí se diody na levé části odsávacího přístroje.
Rozsvícením diod se spouští automatická kontrola funkce, která zahrnuje po sobě jdoucí testy:
 - Těsnost
 - Systém
 - Baterie
4. Je-li zapotřebí nabijte baterii.
5. Chcete-li kontrolu přerušit, stiskněte tlačítko start.
6. S přístrojem postupujte podle následující tabulky.


INDIKACE	VÝZNAM	OPATŘENÍ
Zazní akustický signál Svítí tři zelené kontrolky stavu kontroly funkce	Kontrola funkce úspěšná	Používejte přístroj neo- mezeně
Zazní dva akustické signály Kterákoliv z tří kontrollek stavu funkce svítí čer- veně	Kontrola funkce neúspěšná	Nutné učinit opatření

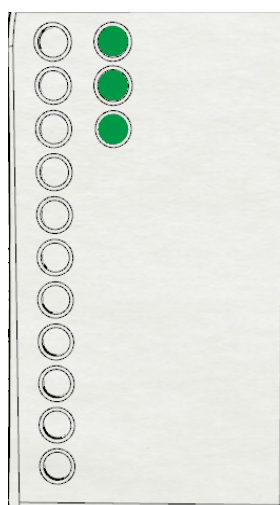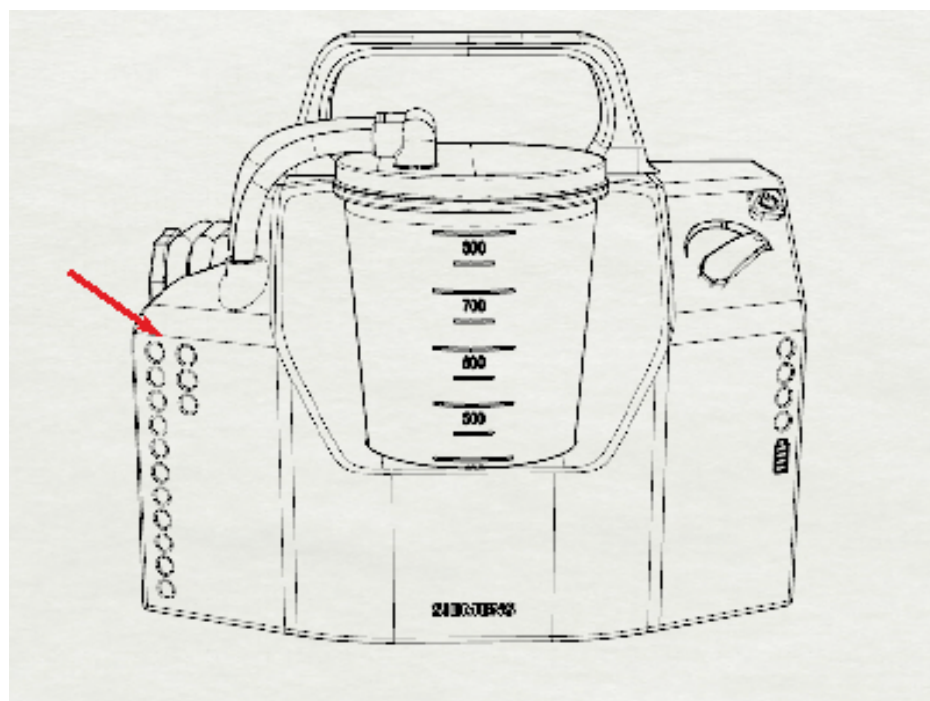



Úspěšná kontrola

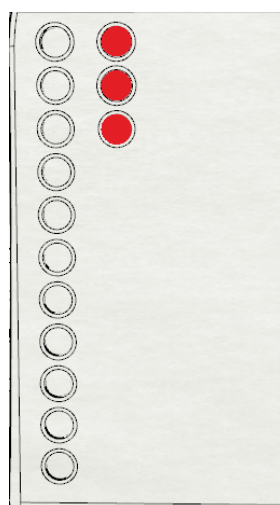


Příklady neúspěšné kontroly

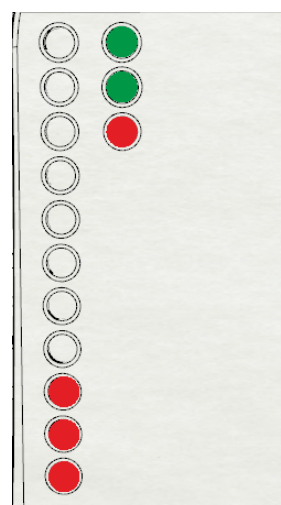

ROZMĚROVÝ VÝKRES

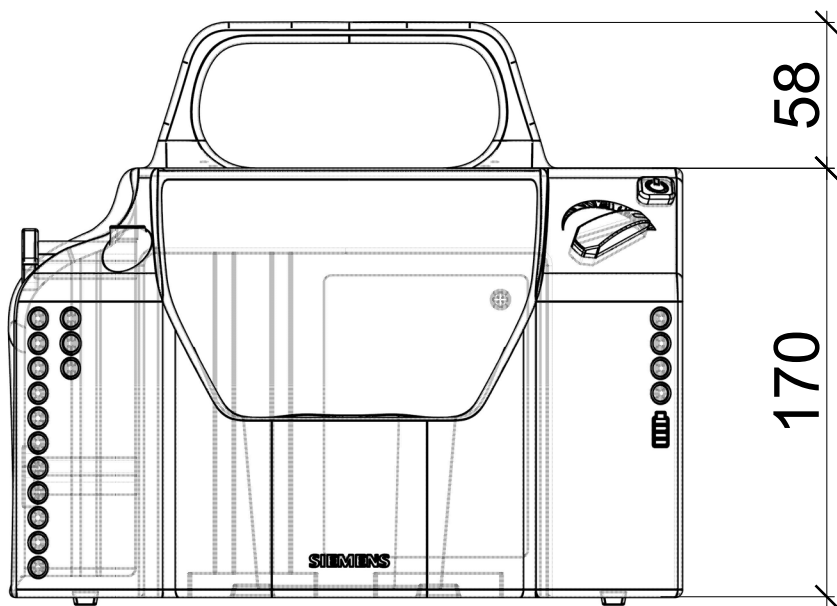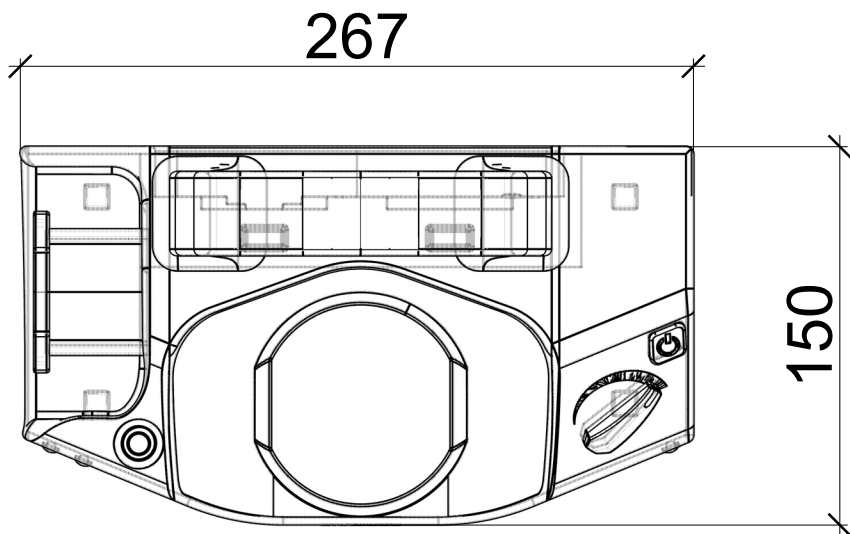

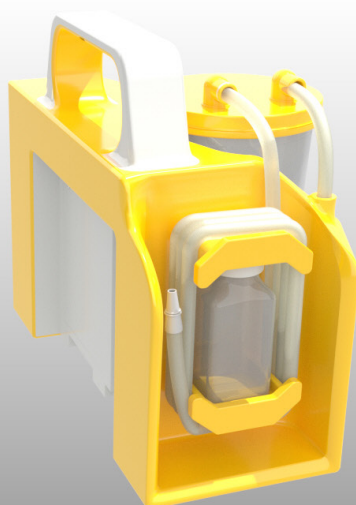

ANDREA ELIANA OPLETALOVÁ